


Trucs et astuces : ganglions

Christine Lefebvre 24/06/2025


OGM sur ganglion à partir de tissu frais

Préparation des culots « secs »

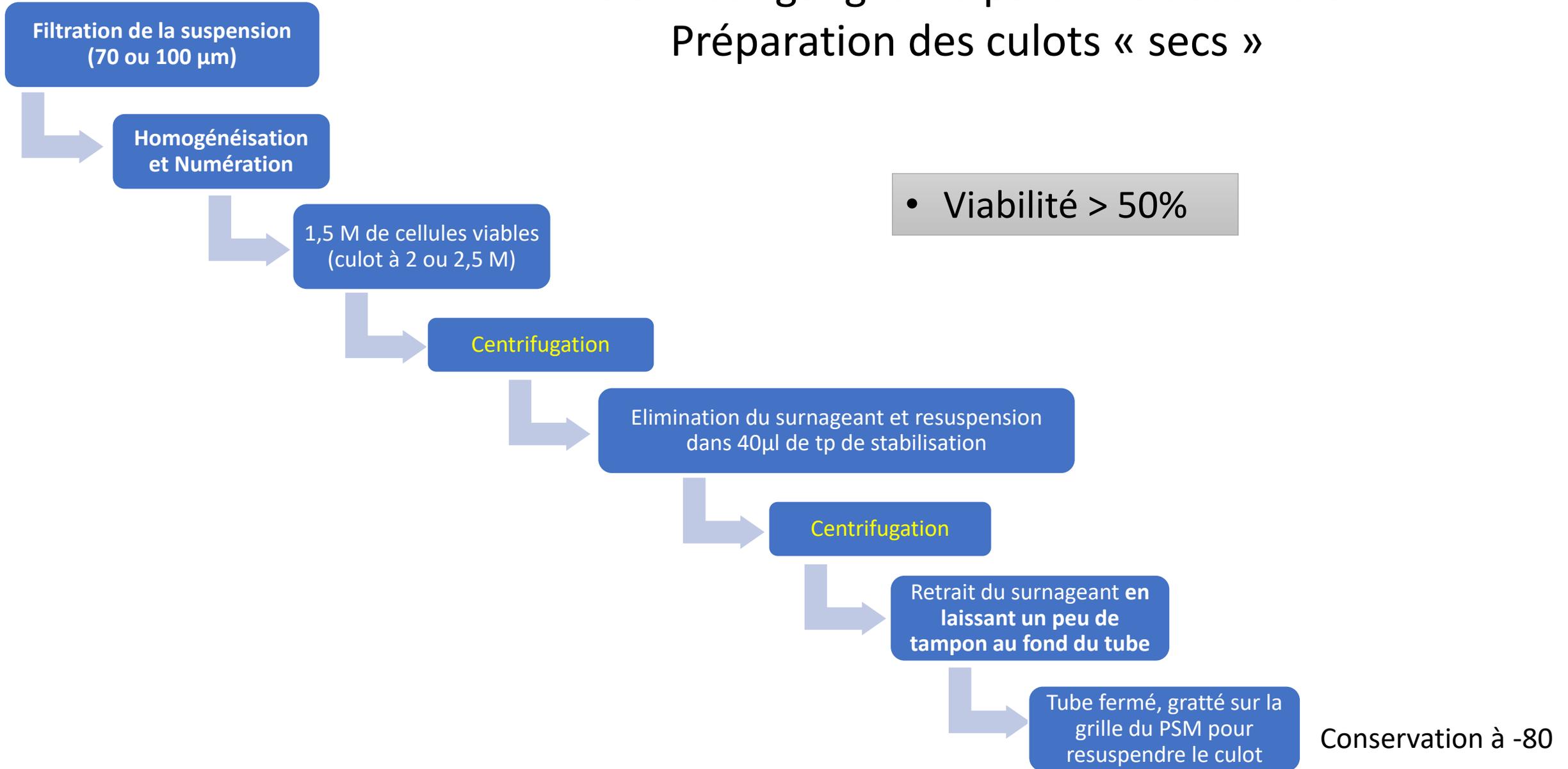

OGM sur ganglion à partir de tissu congelé

Congélation à -80°C de 10-15 mg de tissu frais sans colle, ni OCT

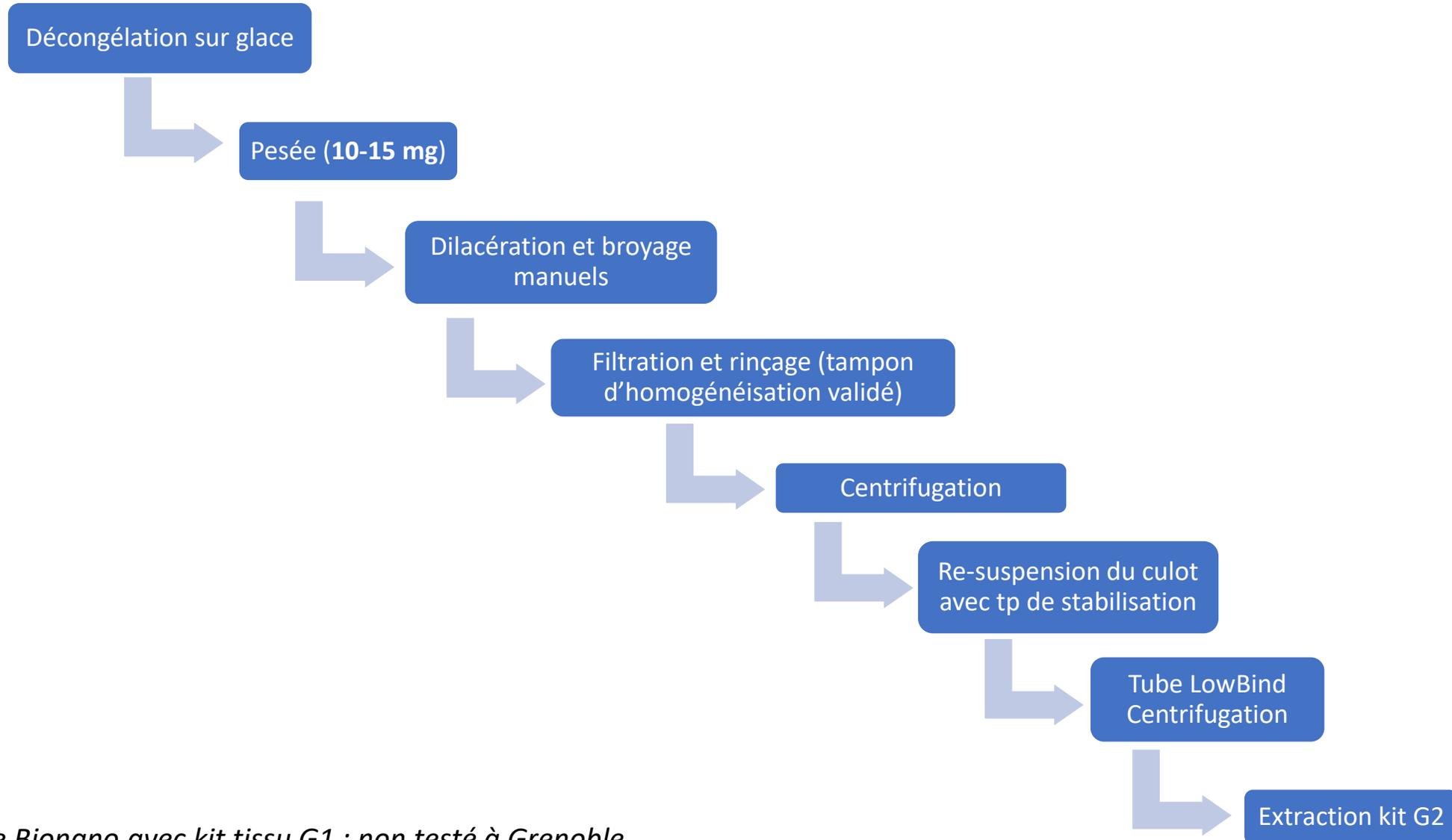

Protocole Bionano avec kit tissu G1 : non testé à Grenoble

OGM sur ganglion à partir de tissu congelé

Protocole Bionano avec kit tissu G1 : non testé

Protocole « maison » simplifié :

fonctionne avec kit G2.3 sans modification (extraction, marquage)

- congélation de 10-15 mg de tissu frais sans colle/OCT

Le jour de l'extraction :

- décongélation, pesée
- broyage manuel
- filtration et rinçage avec tampon d'homogénéisation
- centrifugation, resuspension avec tampon de stabilisation
- cellules prêtes pour extraction d'emblée